



Tabela E direcional — distância de 3 metros

TRIAGEM DE ACUIDADE VISUAL

ANTES DO PRIMEIRO USO

Imprima em papel A4, escala 100 por cento, sem “ajustar à página”. Na folha da tabela há uma barra de conferência: meça com régua antes do primeiro uso. Se não medir exatamente 100 mm, a impressão está fora de escala e o resultado não é válido.

Como aplicar

Fixe a folha da tabela em parede bem iluminada, na altura dos olhos do paciente sentado. Posicione-o a 3 metros, medidos com fita. Teste um olho de cada vez, ocluindo o outro com a palma da mão ou um oclutor, sem comprimir o globo ocular. Se usa óculos para longe, teste com eles.

Peça que aponte com a mão para qual lado as pernas do E estão voltadas — cima, baixo, direita ou esquerda. Desça linha a linha. A acuidade é a menor linha em que o paciente acerta mais da metade dos optótipos.

REGISTRO


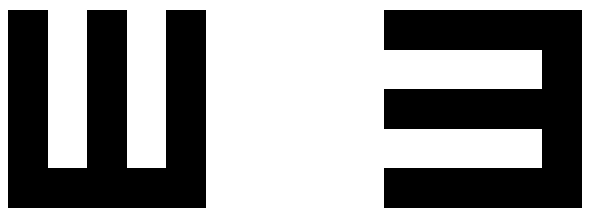
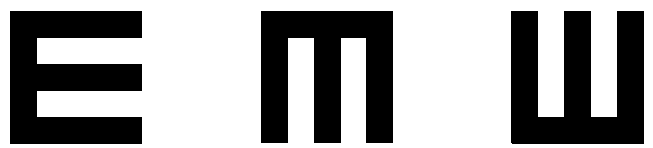
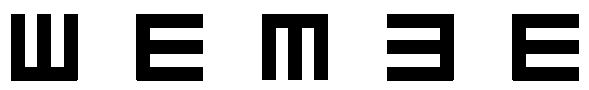
Olho direito _____ Olho esquerdo _____ Ambos _____
Testado com óculos? _____ Data _____ Avaliador _____

Acuidade pior que 6/12 (20/40) em qualquer olho, diferença relevante entre os olhos, ou queixa persistente mesmo com acuidade normal indicam avaliação oftalmológica. Em idosos, pense em catarata, glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética.

POR QUE A TABELA E

A tabela E direcional dispensa alfabetização e é a opção adequada para quem não lê letras. Os optótipos foram construídos na geometria padrão — altura de cinco unidades e traço de uma unidade — e dimensionados para a distância de 3 metros.

Tabela de acuidade — fixar na parede, 3 metros

6/60		20/200
6/36		20/120
6/24		20/80
6/18		20/60
6/12		20/40
6/9		20/30
6/6		20/20



esta barra deve medir exatamente 100 mm